



MANUAL DE INSTALAÇÃO

CAMA MONTREAL

Modelos: MO-GR 80/90

Parabéns e obrigado pela aquisição da cama **Montreal da Wise Comfort**. Uma cama residencial elegante, de aparência moderna que combina muito bem com a maioria dos ambientes. Possui uma estrutura robusta proporcionando-lhe muito conforto e bem estar.

A cama Montreal foi idealizada para ser usada em conjunto com os estrados articuláveis modelo Vienna da Wise Comfort & Care Ltda.

Sua montagem é muito simples e intuitiva, sendo necessário apenas uma chave de fenda comum.

Montagem:

1. Desembale as partes da cama e retire as fixações/calços usados para transporte.
2. Encaixe os conjuntos **cabeceira-pés (A e B)** com as **laterais (C e D)** conforme mostra figura 1.
3. Fixe a montagem acima com os 4 parafusos e porcas (**E e F**) fornecidos no conjunto, figura 1.
4. Certifique-se de que as partes estejam bem alinhadas e justas e, em seguida, aperte bem os parafusos com a chave de fenda para fixá-las.
5. Pronto, a cama está montada. Agora é só montar e posicionar o estrado articulável sobre os apoios laterais da cama como mostra figura 2, (verificar **manual do estrado** para sua montagem).
6. Ligue o cabo de força do estrado na rede elétrica (conforme voltagem especificada no produto).
7. Certifique-se de que as fixações para transporte do estrado foram removidas e acione as teclas do controle remoto para subir ou descer as bases conforme indicado no manual do estrado, obedecendo-se as observações indicadas abaixo.
8. Coloque um **colchão articulável** sobre o estrado e desfrute do conforto da cama Montreal.

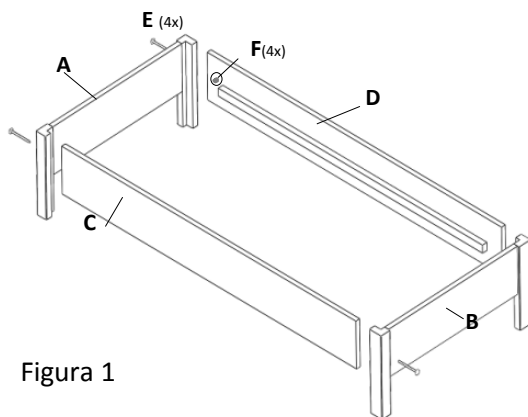


Figura 1

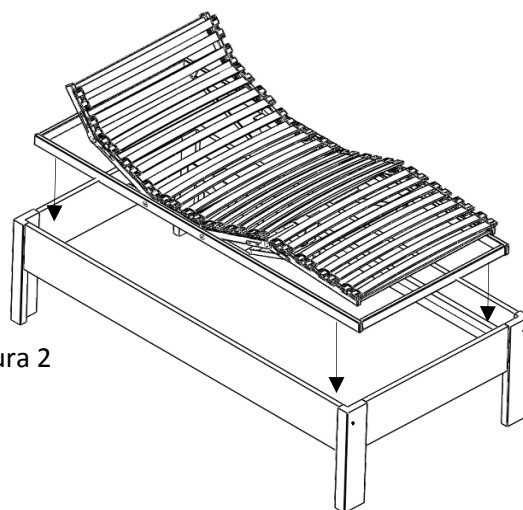


Figura 2

Observações:

1 - Peso máximo = 130 kg distribuídos na extensão do estrado ou conforme especificado no manual. **Não acionar o motor** com pessoas ou qualquer tipo de peso nas extremidades do estrado. **Não saltar ou sentar nas extremidades do estrado** enquanto estiverem levantadas.

2 - Não acione o motor **continuamente** por mais de 2 minutos por risco de danos pelos quais o fabricante não se responsabiliza. (tempo de espera após uso contínuo > 10 Min.)